



Masážna mini pištoľ

sk **Návod na použitie**

masážny násadec
(gulový násadec)

USB-C nabíjací kábel

bez vyobrazenia: úložné vrecko

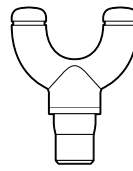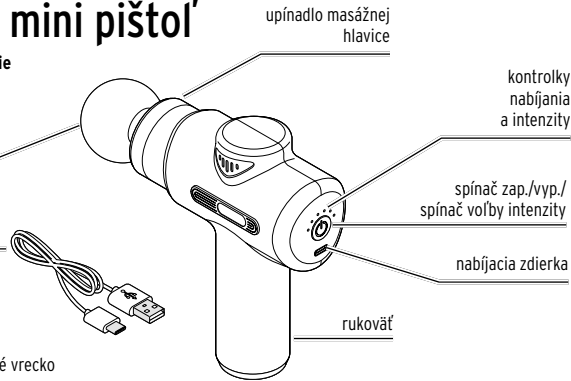


ihlicový násadec

Na stredne veľké svalové skupiny napr. svaly popri krčnej chrbtici alebo na lýtkach.




plochý násadec

Na malé svalové skupiny napr. v oblasti pliec a šije.

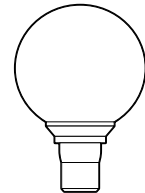

gulový násadec

Na veľké svalové skupiny napr. na stehenné alebo sedacie svaly.

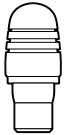

kuželový násadec

Na bodový masáž napr. spúšťacích bodov alebo na malé oblasti svalov napr. na chodidlách a v blízkosti zápästia.

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Masážna mini pištoľ koncipovaná na masáž a môže prispieť k zvýšeniu pohody.
- Masážna mini pištoľ je určená na súkromné použitie. Nie je vhodná pre klinickú, masážnu prax, wellness štúdiá atď. Masážna mini pištoľ nie je zdravotnícka pomôcka a neslúži na ošetrovanie bolesti.
- V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím spýtajte svojho lekára.
- Výrobok používajte výlučne ...
 - ... na vonkajšiu aplikáciu na tele.
 - ... na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Použitie v rozpore s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento prístroj smú používať deti od 14 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

Na eliminovanie ujmy na zdraví dôrazne neodporúčame použitie prístroja v nasledujúcich prípadoch:

- Nepoužívajte výrobok, ...
 - ... pri patologických zmenách na chrbtici.
 - ... počas tehotenstva.
 - ... pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. pri podliatinách, zápaloch, otvorených ranách, prolapse medzistavcových platničiek atď.).
 - ... po požití látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnemy (napr. lieky zmiernujúce bolesť, alkohol).
 - ... na očiach, v blízkosti očí, na hrtane, na kostiach a kĺboch, priamo na chrbtici, v oblasti genitálií alebo obličiek alebo iných zvlášť citlivých častiach tela.
 - ... keď ležíte v posteli.
 - ... pol hodinu pred jedlom alebo po jedle.
 - ... na zvieratách.
 - ... pri viditeľnom poškodení prístroja.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom, predovšetkým ...

- ... ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.
- ... ak nosíte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.
- ... pri abnormálnom krvnom tlaku alebo vysokej horúčke.
- ... pri trombózach.
- ... pri cukrovke.
- ... pri bolestiach neznámeho pôvodu.

- Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút. Dlhšia masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niektorých prípadoch to môže viesť namiesto k uvoľneniu svalov k ich zvýšenému napätiu.
- Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo kožné vyrážky, okamžite ukončíte masáž a výrobok viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce upozornenia:

- Nepichajte do výrobku žiadne špicaté alebo ostré predmety, ako sú napr. zatváracie špendlíky a pod.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade poruchy alebo poškodenia dajte výrobok opraviť do kvalifikovanej opravovne.
- Zapnutý výrobok nenechávajte nikdy bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa smie nabíjať len v suchých vnútorných priestoroch. Na nabíjanie používajte vhodný USB sieťový adaptér (pozri „Technické údaje“, nie je súčasťou dodávky) a len priložený nabíjací kábel USB-C na USB-A.
- Nepoužívajte a nenabíjajte prístroj v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete. Neponárajte výrobok počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Udržujte výrobok, aj keď sa nenabíja, v dostatočnej vzdialenosti od mokra a vlhkosti.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, po úplnom nabití prístroja, pri búrke a pred čistením prístroja.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Prístroj obsahuje pevne osadený lítiový akumulátor. Nehádzte prístroj do ohňa. Inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok sa počas nabíjania zohrieva. Nezakrývajte výrobok.
- Nenabíjajte výrobok v blízkosti výbušných plynov.
- Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vlhkosti, vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia na výrobku alebo na priloženom nabíjacom kábli.

• Okrem výmeny násadcov na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

• Akumulátor je osadený pevne a nedá sa vymeniť. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

POZOR - Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

- Prístroj nezapínajte bez masážneho násadca.
- Počas používania majte dlhé vlasy, retiazky a pod. mimo dosahu prístroja.
- Výrobok nepoužívajte pod prikrývkou. Prístroj sa môže zohriať.
- Chránajte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nesadajte si na prístroj! Nekladte naň žiadne ťažké predmety. Môže sa tým poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje


Model:	689 805
Akumulátor:	Lítiový-iónový 7,4 V --- 1200 mAh (testovaný podľa UN 38.3) (symbol --- znamená jednosmerný prúd) menovitá energia: 8,88 Wh \pm 10 %
Doba nabíjania:	cca 3,5 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 3 hodiny (s plne nabitým akumulátorom a najvyššej intenzite)
Trieda ochrany:	III ⚡
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.



Nabíjanie

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

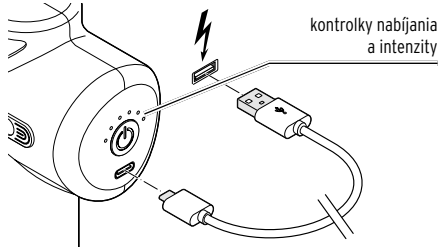

1. Zapojte konektor dodaného USB-C nabíjacieho kábla do nabíjacej zdievky na prístroji.
2. Prepojte USB-C nabíjací kábel s vhodným USB sieťovým adaptérom a zapojte ho do sieťovej zásuvky.


Blikajúca kontrolka zobrazuje, že sa akumulátor nabíja. Svetiace kontrolky zobrazujú stav nabitia:

3. Akumulátor je plne nabitý, ak všetky kontrolky svietia a žiadna už neblíkajú. Odpojte potom sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky a USB-C nabíjací kábel z nabíjacej zásuvky.


Doba nabíjania pri vybitom akumulátore je cca 3 - 4 hodiny. Prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom a najvyššou intenzitou je cca 3 hodiny.

- i** Na čo možno najdlhšie udržanie plnej kapacity akumulátora ho každé 3 mesiace úplne nabite, aj keď sa nepoužíva. Kapacita akumulátora vydrží najdlhšie pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skraca.

Používanie

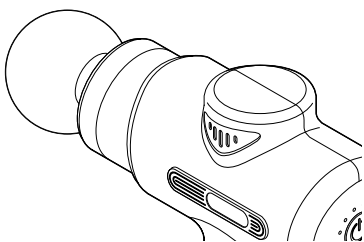

1. Želaný násadec zasuňte do držiaka násadcov na prístroji.

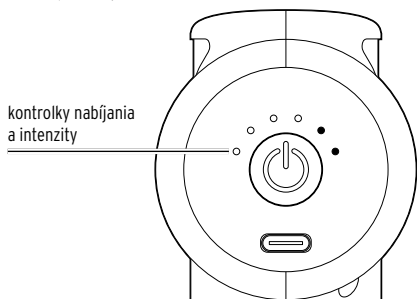

- i** Ak si chcete zobrazíť stav nabitia akumulátora, krátko stlačte tlačidlo

2. Podržte tlačidlo stlačené, aby ste prístroj zapli.

Prvá kontrolka svieti a je zapnutá najnižšia intenzita masáže.


3. Stlačte tlačidlo vždy krátko, aby ste po stupňoch zvýšili intenzitu masáže.

V závislosti od nastavenej intenzity masáže svieti príslušný počet kontroliek.

Ak svieti všetkých šesť kontroliek, dosiahla sa maximálna intenzita masáže.

4. Podržte tlačidlo stlačené, aby ste vypli prístroj. Kontrolky zhasnú.
5. Pomaly pohybujte masážnym násadcom a v závislosti od násadca krúživými pohybmi po masírovanej časti tela.

- i** Prístroj netlačte príliš silno na pokožku.
- Nikdy nenechávajte prístroj pôsobiť na jednom mieste príliš dlho.
- Prístroj neaplikujte priamo na chrčtici.** Pri používaní vidlicového násadca ním prechádzajte po chrčtci tak, aby sa jeho hroty nachádzali vedľa stavcov.

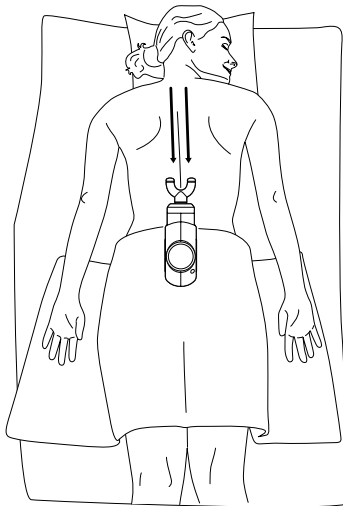

- i** Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút. Prístroj sa preto vypne po cca 15 minútach automaticky.
- ▷ Po použití vytiahnite masážny násadec z držiaka.

Ošetrovanie

- ▷ Na čistenie odpojte prístroj od elektrickej siete a vypnite ho.
- ▷ Prístroj a násadce utrite v prípade potreby mierne navlhčenou handričkou.
- ▷ Prístroj uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Poruchy/pomoc

Prístroj sa nedá zapnúť.

- Nie je potrebné nabiť akumulátor?

Prístroj sa nedá nabiť.

- Skontrolujte konektorové spoje medzi prístrojom, USB-C nabíjacím káblom, sieťovým adaptérom a zásuvkou.
- Vytiahnite nakrátko sieťový adaptér zo zásuvky a USB-C nabíjací kábel a skúste to znova.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a integrovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

- Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.