




Rešpektujte návod
na použitie!



Gélové obklady

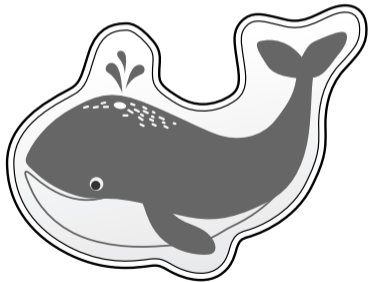

sk **Návod na použitie**

Vážení zákazníci!

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Váš tím Tchibo

Používanie

Obklady neaplikujte priamo na pokožke, ale ich vždy dodatočne podložte mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna (napr. malý uterák pre hostí a pod.).

Aplikácia tepla - na podpornú liečbu bolesti brucha, stiahnutých svalov a bolestí svalov (výborne pomáha aj pri chladných rukách a chodidlách)

- ▷ Obklady vložte na cca 5 minút do hrnca s vodou horúcou max. 60 °C. **Voda nesmie byť vriaca!** V hrnci musí byť dostatok vody, aby sa obklady nedotýkali horúceho dna hrnca. Obklady vyberte drevenými kliešťami a pod., nie prstami - nebezpečenstvo obarenia! Skôr než obklady budete aplikovať na vašom dieťati, nechajte ich dostatočne vychladnúť.

Aplikácia chladu - na podpornú liečbu vyvrtnutí, podliatín, opuchov, pomliaždenín, bolestí zubov, bolestí hlavy, pichnutia hmyzom

- ▷ Obklady vložte na cca 2 hodiny do chladničky (nie do mrazničky!). Následne sú pripravené na okamžité použitie.

Čistenie / Skladovanie

- V prípade potreby gélové obklady poutierajte vlhkou handričkou. Skladujte ich na chladnom a suchom mieste bez priameho slnečného svetla.



Obklady zodpovedajú požiadavkám smernice EÚ
93/42/EHS pre zdravotnícke prostriedky.



výrobca:

Handelshaus Dittmann GmbH
Kissinger Str. 68,
97727 Fuchsstadt, Germany



dátum výroby:
(rok/mesiac):

2019-03



kód šarže:

V2019375307

používať pri teplotách:

od +5 °C do +40~45 °C
(spodný a horný teplotný rozsah)

Číslo výrobku: 375 307

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Na aplikáciu tepla a chladu. Môžu tmiť ťažkosti, napr. pri bolestiach brucha, natiahnutých svaloch, bolestiach svalov, opuchoch, pichnutiach hmyzom, vyvrtnutiach, podliatinách, pomliaždeninách, bolestiach zubov a hlavy.

Obklady nepoužívajte na poranenej pokožke, pri Raynaudovom syndróme, ani po požití liekov proti bolesti.

Teplé obklady nepoužívajte pri zvýšenej teplote alebo pri zápaloch. V týchto prípadoch sa obklady smú používať len na chladenie.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- **Nepoužívajte ako podporu pri prerezávaní zubov malých detí!**

Dbajte na to, aby deti nehrýzli do gélových obkladov, ani ich nežuli. Gél v obkladoch nie je jedovatý, ale obsahuje horké látky na zabezpečenie toho, že dieťa výrobok nebude hrýzť, ani neprehtne gél, resp. ho znovu vyplúje.

- Tento výrobok nie je hračka. Výrobok udržujte mimo dosahu detí.

- Gélové obklady sa smú používať len pod dohľadom dospelých.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred popáleninami a podchladením

- Gélové obklady nesmú používať osoby s poruchou vnímania tepla alebo chladu. Malé deti reagujú na teplo a chlad citlivejšie. Isté ochorenia, ako napr. cukrovka, môžu byť spojené s poruchami vnímania teploty. Postihnuté osoby alebo osoby s podlomeným zdravím si príp. ani nemusia všimnúť, že im je príliš horúco alebo príliš chladno. Preto nepoužívajte tento výrobok na deťoch mladších ako 3 roky, na osobách odkázaných na pomoc, chorých osobách, resp. na osobách s poruchou vnímania tepla alebo chladu. Pri pochybnostiach o priaznivých účinkoch na vaše dieťa alebo pri problémoch s krvným obehom požiadajte najskôr svojho lekára o konzultáciu.
- Na vylúčenie popálenín alebo podchladenia otestujte teplotu výrobku pred použitím na vnútornej strane zápästia.

Nezabúdajte, že popáleniny môžu vznikáť aj pri teplotách okolo 41 °C. Závisí to vždy od trvania aplikácie! Obklady neaplikujte priamo na pokožke, ale ich vždy dodatočne podložte mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna (napr. malý uterák pre hostí a pod.).

- Gélové obklady vychladzujte v chladničke, nie v mrazničke. Obklady vychladené v mrazničke by mohli príp. už po niekoľkých minútach používania spôsobiť omrzliny!
- Pri chladivej aplikácii v oblasti hlavy nesmie byť teplota výrobku príliš nízka. Vychladené gélové obklady neaplikujte dlhšie ako cca 10 minút bez prestávky. Nebezpečenstvo podchladenia!
- Obklady počas rokov strácajú svoj objem. Keď sa objem značne zmenšil, vymeňte výrobok za nový.
- Po použití nechajte svojmu telu dostatočnú dobu na regeneráciu pred opätovným použitím teplého alebo chladivého gélového obkladu.
- Obklady sú určené len na vonkajšie použitie. Obsah sa nesmie konzumovať.

Pri kontakte pokožky s obsahom obkladu - napr. pri poškodení fólie - umyte postihnuté miesta na pokožke pod tečúcou vodou.

POZOR - Vecné škody

- Neprehrievajte ani nepodchladzujte gélové obklady, mohli by sa tým poškodiť.
- Obklady udržiajte mimo dosahu špicatých a ostrých predmetov.
- Skôr než sa poškodeného gélového obkladu dotknete, nechajte ho vychladnúť/zohriať na izbovú teplotu. Nepoužívajte ho viac, ani ho neopravujte alebo nemodifikujte.
- **Výrobok nie je vhodný na zohrievanie v mikrovlnnej rúre alebo v rúre na pečenie.**
- Gélové obklady neukladajte do mrazničky. Nesmú sa vystavovať teplotám pod 0 °C.
- Gélové obklady nestláčajte.

Likvidácia

- Zlikvidujte výrobok v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. Informácie vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.