


Masážny prístroj, vodotesný

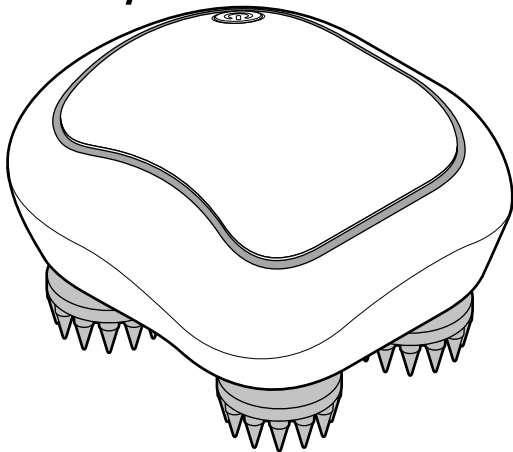

sk Návod na použitie

118357AB1X1XII · 2021-08

Vážení zákazníci!

Váš nový masážny prístroj dokáže uvoľniť napätie na hlave, záhlaví a tele. Vďaka rôznym masážnym hlavicám a voliteľným rýchlostiam si môžete sami nastaviť masáž pre svoje pohodlie. Masážny prístroj je vhodný na používanie pod sprchou alebo vo vani.

Obsah

- 2 K tomuto návodu
- 3 Bezpečnostné upozornenia
- 7 Prehľad (obsah balenia)
- 8 Nabíjanie akumulátora
- 9 Používanie
- 10 Čistenie a dezinfikovanie
- 11 Likvidácia
- 12 Technické údaje

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok je určený na samomasáž na zvýšenie pocitu pohodlia.
- Výrobok je vhodný na používanie pod sprchou alebo vo vani (trieda ochrany IPX7 – ochrana pred dočasným ponorením).
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nie je určený pre kliniky, masážne salóny, wellness štúdiá atď. Masážny prístroj nie je zdravotnícka pomôcka a neslúži na liečbu bolesti. V prípade pochybností alebo neistoty sa pred používaním opýtajte svojho lekára.

- Prístroj používajte výlučne ...

... na vonkajšie aplikovanie na tele.

... na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom, ktorý je opísaný v tomto návode. Každé neodborné používanie môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať zariadenia

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Aby ste predišli poškodeniu zdraviu, nepoužívajte prístroj v nasledujúcich prípadoch:

- Masážny prístroj nepoužívajte ...

... počas tehotenstva.

... pri chorobnej zmene alebo poranení v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. pri pomliaždeninách, zápaloch, otvorených ranách, prolapse medzistavcových platničiek atď.).

- ... po užití prípravkov, ktoré spôsobujú obmedzenú vnímavosť (napr. lieky tlmiace bolesť, alkohol).
- ... na očiach, v blízkosti očí, na hrtane, na kostiach alebo kĺboch, v oblasti genitálií a obličiek alebo na iných mimoriadne citlivých častiach tela.
- ... na zvieratách.
- ... ak ležíte v posteli.
- ... pri viditeľnom poškodení prístroja.
- Pred používaním prístroja sa opýtajte svojho lekára, predovšetkým ...
 - ... keď trpíte závažnou chorobou, alebo ste po operácii.
 - ... ak nosíte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.
 - ... pri trombózach.
 - ... pri cukrovke.
 - ... pri bolestiach neznámeho pôvodu.

- Masáž by nemala prekročiť 20 minút. Dlhšie trvanie masáže môže spôsobiť prestimulovanie svalov. V niektorých prípadoch môže potom namiesto uvoľnenia dôjsť k nadmernému napnutiu v svaloch.
- Ak sa počas používania vyskytnú bolesti alebo kožné vyrážky, ukončíte ihneď masáž a prístroj už nepoužívajte.

Dodržiujte nasledujúce pokyny pre bezpečné používanie:

- Nechajte prístroj v prípade poruchy alebo poškodenia opraviť v špecializovanom servise.
- Prístroj nikdy nenechávajte pôsobiť dlhšie na jednom mieste. Vykonávajte krúživé pohyby.
- Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte len špecializovanému servisu. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Masážny prístroj samotný je chránený pred vniknutím vody, nabíjací stojan však nie je chránený.

Pri nabíjaní masážneho prístroja rešpektujte:

- Neponárajte nabíjací stojan do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa nabíjacieho stojana vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu. Nenabíjajte prístroj v blízkosti vody. Do nabíjacieho stojana vkladajte len suchý masážny prístroj. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Ak nabíjací stojan spadne počas nabíjania do vody, nesiahajte naň! Ihneď vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Nechajte prístroj, micro USB kábel a sieťový adaptér úplne vyschnúť, skôr ako sieťový adaptér znova zapojíte do zásuvky.

- Použite vhodný USB sieťový adaptér (pozri „Technické údaje“). Nabíjací stojan zapájajte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie súhlasí s technickými údajmi výrobku.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, resp. po úplnom nabití prístroja. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom alebo na nabíjacom stojane viditeľné škody alebo po jeho páde.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom


- Masážny prístroj obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovaný servis.

- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na nabíjanie výrobku používajte len originálny nabíjací stojan.


POZOR pred poraneniami a vecnými škodami

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, prípadne rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Prehľad (obsah balenia)

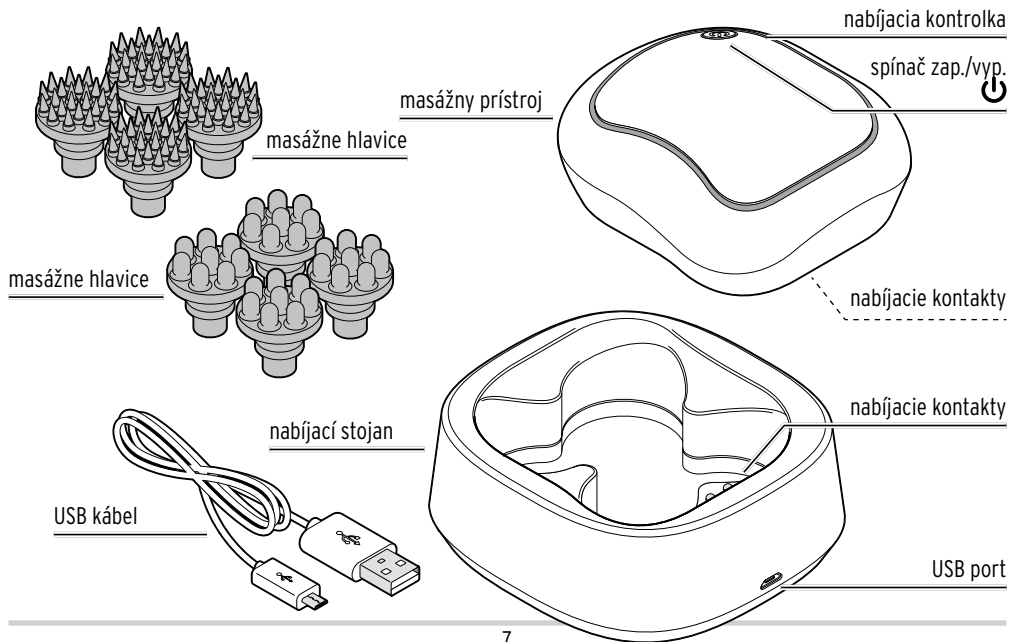


Nabíjanie akumulátora

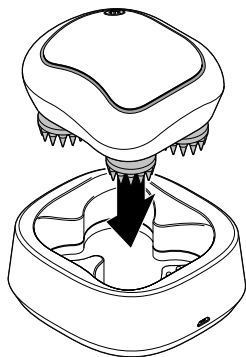

Potrebujete USB sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky).

1. Nasadíte masážny prístroj na nabíjací stojan. Nabíjacie kontakty na masážnom prístroji musia dosadať na nabíjacie kontakty nabíjacieho stojana.

2. Pripojíte nabíjací stojan do elektrickej siete.

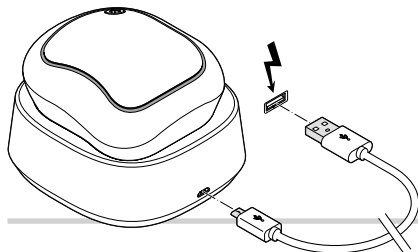

Kontrolky blikajú počas nabíjania.

Po úplnom nabití akumulátora kontrolky svietia trvalo.

Doba nabíjania pri vybitom akumulátore:

cca 2 - 3 hodiny

Doba prevádzky pri úplne nabitom akumulátore:

cca 1,5 hodiny



Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote.


Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.

Na čo najdlhšie zachovanie plnej kapacity akumulátora ho úplne nabitie, aj pri nepoužívaní, každé 2 až 3 mesiace.

Používanie


Zapnutie/vypnutie

1. Odoberte masážny prístroj z nabíjacieho stojana. Kontrolky zhasnú.
 2. Na zapnutie prístroja stlačte spínač zap./vyp. 
Prístroj sa spustí vždy s najpomalšou rýchlosťou, kontrolky svietia.
 3. Na zmenu rýchlosti stlačte vždy krátko spínač zap./vyp.  ...
Rýchlosť sa prepína dookola z ...
... pomaly (kontrolka bliká 1x) na
... stredne (kontrolka bliká 2x) na
... rýchlo (kontrolka bliká 3x)
a znova od začiatku.
- ▷ Na opätovné vypnutie masážneho prístroja podržte spínač zap./vyp.  na cca 3 sekundy stlačený.

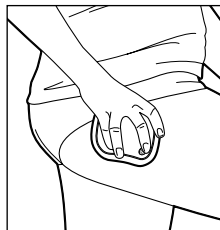

4. Nasadíte masážny prístroj na masírovanú časť tela. Prístroj pritláčajte na pokožku zľahka alebo aj silnejšie, aby ste zmenili intenzitu masáže.

Výmena masážnych hlavíc

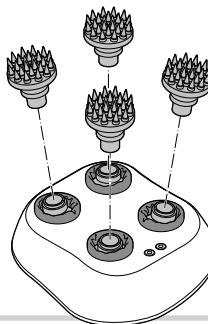

- ▷ Vytiahnite masážne hlavice jednoducho nahor a nasuňte iné masážne hlavice.

Čistenie a dezinfikovanie

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte ani žiaden bežný dezinfekčný prostriedok.

- ▷ Masážny prístroj môžete - s nasadenými masážnymi hlavicami - opláchnuť pod tečúcou vodou.
- ▷ Masážne hlavice môžete vyčistiť teplou vodou a bežným domácim prostriedkom na riad.
- ▷ Nabíjací stojan v prípade potreby poutierajte handričkou mierne navlhčenou vo vode.
- ▷ Na dezinfikovanie môžete masážne hlavice zotrieť handričkou navlhčenou v etylalkohole.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Technické údaje

Model:	622 403
Akumulátor:	Lítium-iónový (testovaný podľa UN 38.3) 3,7 V  1200 mAh Menovitá energia: 5 Wh (symbol  znamená jednosmerný prúd)
USB vstup:	5 V  1 A
Doba nabíjania:	cca 2 - 3 hodiny
Doba prevádzky:	max. 90 minút (pri plne nabitom akumulátore)
Trieda ochrany:	III 
Výkon:	5 W
Druh krytia:	IPX7 (ochrana pred dočasným ponorením do vody)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Výrobca:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth,
The Netherlands



Číslo výrobku: 622 403