

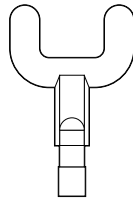


Masážna mini pištoľ


sk **Návod na použitie**

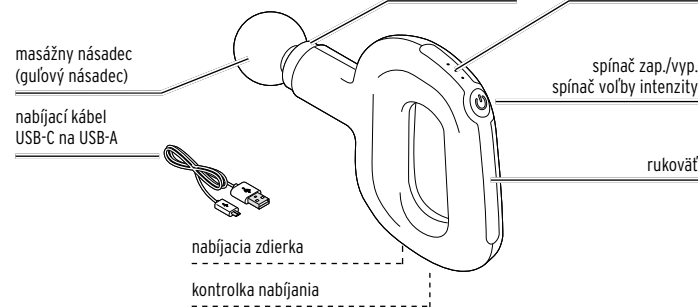


ihlicový násadec
na stredne veľké svalové skupiny, napr. svaly popri chrbtici alebo na lýtkach

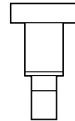

malý plochý násadec
na malé svalové skupiny, napr. v oblasti pliec a šije

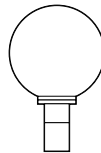


guľový násadec
na veľké svalové skupiny, napr. na stehenné alebo sedacie svaly

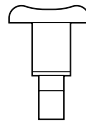

konkávny násadec
napr. na masáž stehien, lýtok alebo ramien



kužeľový násadec
na bodovú masáž, napr. spúšťacích bodov alebo na malé oblasti svalov, napr. na chodidlách a v blízkosti zápästia

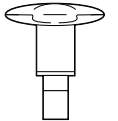

krížový násadec
na všeobecnú aplikáciu na väčšie svalové skupiny

Bezpečnostné upozornenia



• Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Masážna mini pištoľ je koncipovaná na masáž a môže prispieť k zvýšeniu pohody.
- Masážna mini pištoľ je určená na súkromné použitie. Nie je vhodná pre klinickú, masážnu prax, wellness štúdiá atď. Masážna mini pištoľ nie je zdravotnícka pomôcka a neslúži na ošetrovanie bolesti.
- V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím obráťte na svojho lekára.
- Výrobok používajte výlučne...
 - ... na povrchu tela, nie vnútorne.
 - ... na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Použitie v rozpore s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento prístroj smú používať deti od 14 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Tento výrobok nie je hračka pre deti. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

Na eliminovanie ujmy na zdraví dôrazne neodporúčame použitie prístroja v nasledujúcich prípadoch:

- Nepoužívajte výrobok,
 - ... pri patologických zmenách na chrbtici.
 - ... počas tehotenstva.
 - ... pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. pri podliatinách, zápaloch, otvorených ranách, prolapse medzistavcových platničiek atď.).
 - ... po požití látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnemy (napr. lieky zmierňujúce bolesť, alkohol).
 - ... na oči, v blízkosti očí, na hrtné, na hlavu, na kostiach a kĺboch, priamo na chrbtici, v oblasti genitálií alebo obličiek alebo iných zvlášť citlivých častiach tela.
 - ... pri ležaní v posteli.
 - ... pol hodinku pred jedlom alebo po jedle.
 - ... na zvieratách.
 - ... pri viditeľnom poškodení prístroja.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, predovšetkým...

- ... ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.
- ... ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.
- ... pri abnormálnom krvnom tlaku alebo vysokej horúčke.
- ... pri trombózach.
- ... pri cukrovke.
- ... pri bolestiach neznámeho pôvodu.
- Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút. Dlhšia masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niektorých prípadoch to môže viesť miesto k uvoľneniu svalov k ich zvýšenému napätiu.
- Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo kožné vyrážky, okamžite ukončíte masáž a výrobok viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce upozornenia:

- Nepichajte do výrobku žiadne špicaté alebo ostré predmety, ako sú napr. zatváracie špendlíky a pod.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte výrobok opraviť v kvalifikovanej opravovni.
- Zapnutý výrobok nenechávajte nikdy bez dozoru.
- Výrobok sa smie nabíjať len v suchých vnútorných priestoroch. Na nabíjanie používajte vhodný USB sieťový adaptér (pozri „Technické údaje“, nie je súčasťou dodávky) a len priložený nabíjací kábel USB-C na USB-A.
- Nepoužívajte a nenabíjajte prístroj v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete. Neponárajte výrobok počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok chráňte pred mokrom a vlhkosťou aj vtedy, keď nie je nabitý.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, po úplnom nabití prístroja, pri búrke a pred čistením prístroja.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Prístroj obsahuje pevne osadený lítium-iónový akumulátor. Nehádzajte prístroj do ohňa. Inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok sa počas nabíjania zohrieva. Nezakrývajte ho.
- Nenabíjajte výrobok v blízkosti výbušných plynov.
- Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vlhkosti, vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia na výrobku alebo na priloženom nabíjacom kábli USB-C na USB-A.
- Okrem výmeny násadcov na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

- Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

POZOR - Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

- Prístroj nezapínajte bez masážneho násadca.
- Počas používania držte dlhé vlasy, reťaze atď. mimo dosahu prístroja.
- Výrobok nepoužívajte pod posteľnou prikrývkou a pod. Prístroj sa môže zohriať.
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Nesadajte si na prístroj! Nekladte naň žiadne ťažké predmety. Môže sa tým poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje


Model:	A004874
Číslo výroby:	632 859
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V  4 500 mAh (testovaný podľa UN 38.3) (symbol  pre jednosmerný prúd) menovitá energia: 16,2 Wh $\pm$ 10 %
Doba nabíjania:	cca 3,5 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 120 minút (pri plne nabitom akumulátore a maximálnej rýchlosti)
Stupeň ochrany:	III 
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Holandsko)




V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Nabíjanie

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

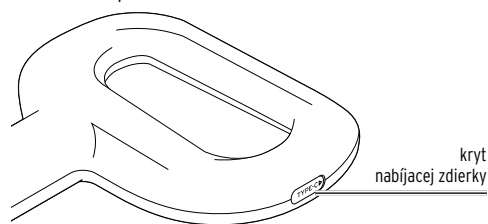

1. Z nabíjacej zdievky stiahnite kryt.

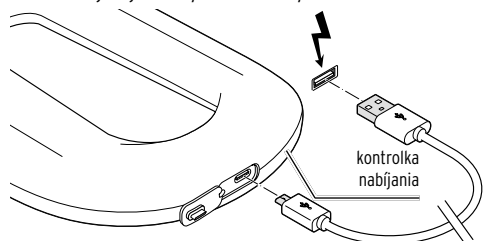

2. Zapojte konektor dodaného nabíjacieho kábla USB-C na USB-A do nabíjacej zdievky na prístroji.

3. Prepojte nabíjací kábel USB-C na USB-A s vhodným USB sieťovým adaptérom a zapojte ho do sieťovej zásuvky. Integrovaná nabíjacia kontrolka svieti na červeno.


4. Akumulátor je plne nabitý, keď kontrolka nabíjania svieti na zeleno. Odpojte potom sieťový adaptér od sieťovej zásuvky a nabíjací kábel USB-C na USB-A od nabíjacej zdievky.

5. Na nabíjaciu zdievku znovu nasadíte kryt.


Doba nabíjania pri vybitom akumulátore je cca 3,5 hodiny. Prevádzková doba pri plne nabitom akumulátore a maximálnom rýchlostnom stupni je cca 120 minút.

i Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátor vybiť a znovu nabiť každé 3 mesiace, a to aj pri jeho nepoužívaní. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skracuje.

Používanie

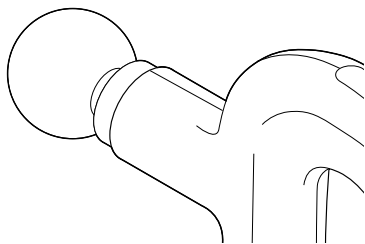

1. Želaný násadec zasuniete do držiaka násadcov na prístroji.

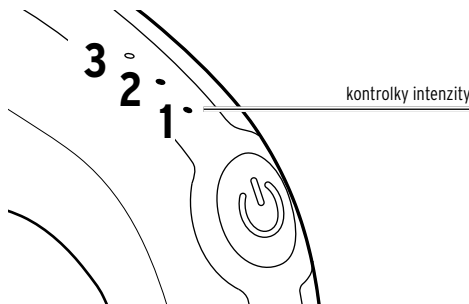

2. Tlačidlo stlačte

- 1x na zapnutie prístroja s nízkou masážnou intenzitou.
- 2x na strednú masážnu intenzitu,
- 3x na vysokú masážnu intenzitu a
- 4x na vypnutie prístroja.


V závislosti od nastavenej masážnej intenzity svieti zodpovedajúci počet kontroliek intenzity (nízka = 1, stredná = 2, vysoká = 3).

Keď prístroj vypnete, všetky kontrolky intenzity zhasnú.

3. Pomaly pohybujte masážnym násadcom krúživými pohybmi po masírovanej časti tela v závislosti od násadca.



- Prístroj netlačte príliš silno na pokožku.
- Nikdy nenechávajte prístroj pôsobiť na jednom mieste príliš dlho.
- **Prístroj neaplikujte priamo na chrbtici.** Pri používaní vidlicového násadca ním prechádzajte po chrbte tak, aby sa jeho hroty nachádzali vedľa stavcov.

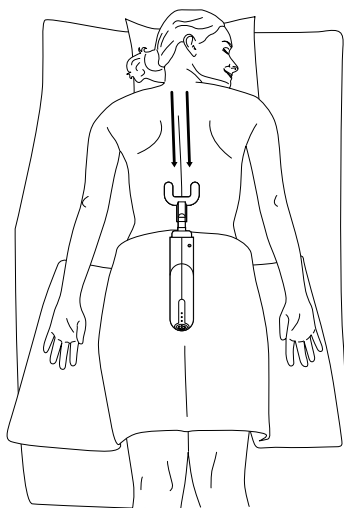

Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút. Prístroj sa po 15 minútach automaticky vypne.

▷ Po použití vytiahnite masážny násadec z držiaka.

Ošetrovanie

- ▷ Na čistenie odpojte prístroj od elektrickej siete a vypnite ho.
- ▷ Prístroj a násadce utrite v prípade potreby mierne navlhčenou handričkou.
- ▷ Prístroj uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Poruchy/pomoc

Prístroj sa nedá zapnúť.

- Nie je potrebné nabíť akumulátor?

Prístroj sa nenabíja.

- Skontrolujte zástrčkové spojenie medzi prístrojom, nabíjacím káblom USB-C na USB-A, sieťovým adaptérom a elektrickou zásuvkou.
- Na chvíľu odpojte sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel USB-C na USB-A z prístroja a skúste to znova.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a integrovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.

Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.