

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok je určený na intenzívne čistenie pokožky. Nie je určený na každodenné používanie, ale smie sa používať max. 2x týždenne.
- Výrobok je koncipovaný na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely, napr. v kozmetických štúdiách. Nie je vhodný na lekárske ošetrovanie.
- Výrobok používajte iba v suchých interiéroch.

Prístroj nepoužívajte ...

- ... priamo na otvorených ranách, popáleninách, kožnej vyrážke, opuchnutej alebo podráždenej pokožke, lupienke, léziách, infekciách (oparoch), pečeňových škvrnách, bradavičkách,
 - ... na očných viečkach, perách, prsných bradavkách, genitáliách,
 - ... po opaľovaní (počkejte min. 1 – 3 dni),
 - ... pri kožných ochoreniach, ako sú kuperóza, ružovka,
 - ... pri poruchách prekrvenia, cukrovke, tuberkulóze, tumoroch, pomliaždeninách, neuralgii trojklaného nervu, ochoreniach štítnej žľazy, herpese,
 - ... po operácii,
 - ... pri užívaní lekárske predpísaných liekov na pokožku v predchádzajúcich 6 mesiacoch,
 - ... po rádioterapii a chemoterapii v uplynulých 3 mesiacoch,
 - ... na miestach s potenciálne zhubnými kožnými nádormi,
 - ... počas tehotenstva,
 - ... pri bolestiach neznámeho pôvodu.
- V sporných prípadoch sa pred použitím poraďte s lekárom.

VAROVANIE pred nesprávnym používaním

- Nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti očí. Tam je pokožka mimoriadne tenká a citlivá. Toto okolie vynechajte. Nepritláčajte nastavce príliš silno na pokožku.
- Nezotrávajte s nasávacím nastavcom na jednom mieste pokožky, ale prechádzajte prístrojom rovnomerne po pokožke, pretože inak sa môžu tvoriť krvné výrony.
- Osoby s citlivou pokožkou môžu reagovať opuchnutím/podráždením pokožky. Vyskúšajte v danom prípade najprv prístroj na menej citlivom mieste, napr. na vnútornej strane predlaktia.
- Použite prístroj najprv len krátko a s nízkou intenzitou, aby ste minimalizovali prípadné reakcie. Doba použitia by na začiatku nemala prekročiť 120 sekúnd, neskôr 5 minút.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať elektrické prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Tento prístroj sa nesmie používať u malých detí, pretože ich pleť je veľmi citlivá.
- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj nenabíjajte priamo vedľa alebo nad umývadlom naplneným vodou.
- Ak prístroj spadne počas nabíjania do vody, nesiahajte naň! Ihneď vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Nechajte prístroj, prípojný USB kábel a sieťový adaptér úplne vyschnúť skôr, ako pripojíte prístroj znova do elektrickej siete.
- Prístroj nenabíjajte v exteriéroch alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.

- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Prístroj zapájajte na nabíjanie iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas nabíjania,
 - ... po úplnom nabití prístroja,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.
 Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný USB kábel.
- Používajte len priložený prípojný USB kábel, ako aj sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný USB kábel uložte tak, aby ste prístroj nedopatrením nestrhli.
- Prípojný USB kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neužívajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenie, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.

VAROVANIE pred poraneniami

- Prístroj obsahuje pevne zabudovaný lítiovo-iónový akumulátor. Tento akumulátor sa nemôže a nesmie samostatne demontovať.
- Výrobok sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Prístroj dôkladne vyčistite po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie“, aby ste odstránili masné usadeniny a ostatné zvyšky.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a integrovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!


Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Prehľad (obsah balenia)

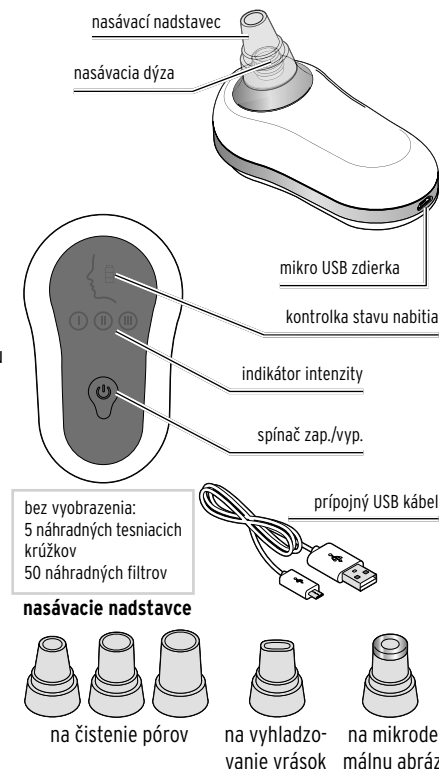

Technické údaje

Model:	622 708
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V 450 mAh (testovaný podľa UN 38.3)
USB port:	5 V $\overline{\text{---}}$ 1000 mA
Doba nabíjania:	cca 2 hodiny
Prevádzkový čas:	cca 1 hodina

Trieda ochrany: III III
 Teplota prostredia: +10 až +40 °C
 Made exclusively for:
 Tchibo GmbH, Überseering 18,
 22297 Hamburg, Germany,
 www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.




Nabíjanie akumulátora

Pred prvým uvedením do prevádzky musíte akumulátor úplne nabiť. Doba nabíjania: cca 2 hodiny. Prístroj musí byť počas nabíjania vypnutý. Nepoužívajte ho počas nabíjania.



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Prístroj nenabíjajte priamo vedľa alebo nad umývadlom naplneným vodou.

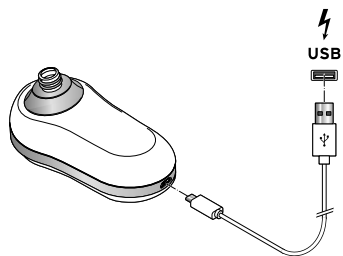

1. Prepojte prípojný USB kábel s prístrojom a vhodným USB sieťovým adaptérom (pozri „Technické údaje“).

2. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky.

Počas nabíjania bliká kontrolka stavu nabitia. Keď je akumulátor plne nabitý, kontrolka svieti trvalo.

3. Po použití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a vytiahnite prípojný USB kábel z prístroja.

Max. doba nabíjania: cca 2 hodiny.

Prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom: cca 1 hodina.

Ak sa prístroj počas používania kvôli chýbajúcej kapacite akumulátora vypne, musí sa akumulátor najprv znova úplne nabiť a až potom sa smie prístroj znova používať.



• Na získanie plnej kapacity akumulátora by ste mali akumulátor aj pri nepoužívaní nabiť každé 2 až 3 mesiace.

• Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 °C až +40 °C.

• Alternatívne k sieťovému adaptéru môžete prístroj nabiť aj prostredníctvom USB prípojky počítača. Vezmite na vedomie, že v tomto prípade sa predlžuje doba nabíjania.

Používanie



VAROVANIE pred podráždením pleti

- Nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti očí. Túto oblasť vynechajte.
- Osoby s citlivou pokožkou môžu reagovať opuchnutím/podráždením pokožky. Vyskúšajte v danom prípade najprv prístroj na menej citlivom mieste.
- Použite prístroj najprv len krátko a s nízkou intenzitou, aby ste minimalizovali prípadné reakcie. Aplikácia na všetkých partiách tváre by nemala zo začiatku prekročiť 2 minúty, neskôr potom 5 minút.
- Nezostávajte s prístrojom na jednom mieste, aby ste zabránili podráždeniam pokožky.

Pred prvou aplikáciou

Vyskúšajte v danom prípade najprv prístroj a reakciu vašej pokožky na menej citlivom mieste, napr. na vnútornej strane predlaktia. Počkajte potom asi 30 minút, či sa neukážu nejaké kožné reakcie, kým začnete s vlastnou aplikáciou.

Výber nasávacieho nastavca

Mikrodermálna abrázia


Pri mikrodermálnej abrázii sa jemne odstraňuje najvrchnejšia zrohovatená kožná vrstva ako pri pleťovom pílingu. Odumreté kožné bunky sa odstránia, drsné povrchy a malé vrásky sa vyhladia, pokožka pôsobí sviežejšie a pružnejšie.

Vákuové ošetrenie

Pri vákuovom ošetrení sa ...
... nečistoty dostávajú na povrch,
... odumreté kožné bunky odsávajú a
... stimuluje sa prerušenie podporujúce čerstvý vzhľad pokožky.

Na mikrodermálnu abráziu použite nastavce so zapusteným kovovým krúžkom.


Na vákuové ošetrenie môžete použiť všetky 4 priložené nasávacie nastavce.

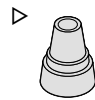

Na čistenie upchatých pórov pri nízkej sacej sile. Ideálne na privyknutie pokožky na začiatku aplikácie ako aj pre jemnú, citlivú pokožku.




Na čistenie upchatých pórov pri akné. Aplikácia pri strednej sacej sile. **Pri čistení hnisavých akné vyrážok vyčistite nastavce po každej jednej vyrážke**, aby ste predišli tvorbe ďalších vyrážok akné.

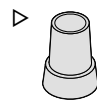

Na dôkladnejšie ošetrenie pri najvyššej sacej sile. Ideálne na odstraňovanie vyrážok pri mastnej pokožke.




Na vyhladenie vrások a na masírovanie a vyhladenie pokožky použite oválny nastavce.

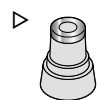

Na mikrodermálnu abráziu použite nasávací nastavce so zapusteným kovovým krúžkom.

Výmena nasávacieho nastavca

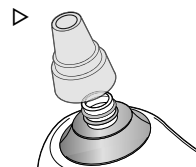

Stiahnite príp. namontovaný nastavce rovno nahor z prístroja a nasadte zvolený nastavce.

Použitie

Príprava

1. Tvár si dôkladne umyte a osušte. Pokožka musí byť čistá, suchá a bez púdru, krémov alebo pod.

2. **Len pri čistení upchatých pórov:** Na otvorenie pórov navlhčite uterák teplou vodou a priložte ho na niekoľko minút na tvár.



Pri prvých 2 - 3 aplikáciách ...

... použite malý precízny nastavce s menšou sacou silou.

... zvolte na prístroji najmenší stupeň intenzity ①.

Otestujte najprv krátko na malej časti pokožky. Ak by sa ihneď alebo neskôr vyskytli nejaké ťažkosti, ihneď prerušte ošetrovanie. Prípadne sa poraďte so svojím lekárom.

Kompletné ošetrenie by nemalo zo začiatku prekročiť 2 minúty, neskôr 5 minút. Používajte prístroj max. 2x do týždňa.

Zapnutie prístroja a výber stupňa intenzity

▷ Stlačte spínač zap./vyp.  a podržte ho stlačený, aby ste prístroj zapli. Prístroj vždy začína so najnižším stupňom intenzity. Na displeji sa zobrazí ①.

▷ Spínač zap./vyp.  solange, stláčate dovtedy, kým nenastavíte želanú intenzitu.

▷ Na vypnutie prístroja podržte spínač zap./vyp.  niekoľko sekúnd stlačený.

Ošetrovanie tváre

1.



Zapnite prístroj a priložte ho na tvár tak, aby sa nasávací nastavce dotýkali pleti, nemohol unikáť, resp. sa nasávať žiaden vzduch a aby ste

cítili nasávaciu silu. Pritom vždy pohybujte prístrojom - nezotrávajte na jednom mieste, pretože inak môžu vzniknúť krvné výrony.



2. Jemne prechádzajte nasávacím nastavcom, ako je to zobrazené na obrázkoch, v smere šípku po príslušnej časti pokožky - zo začiatku 2 - 4x, keď si vaša pokožka zvykne na ošetrovanie 4 - 6x. Prípadne druhou rukou trochu napnite pokožku. Sledujte kontúry svojej tváre. Nepritláčajte príliš silno! V oblasti očí postupujte mimoriadne opatrne!

Po ošetrovaní

▷ Opláchnite tvár studenou až nanajvýš vlažnou vodou. Použite príp. čistiacu emulziu s vyhladzujúcim účinkom, aby ste odstránili zvyšky a aby sa otvorené póry znova zatvorili.

▷ Naneste chladiacu a upokojujúcu pleťovú masku alebo hydratačný krém.

▷ Vaša pokožka je po ošetrovaní jemnejšia a citlivejšia ako zvyčajne. Vyhybajte sa priamemu slnečnému svetlu. Prípadne naneste krém s vysokým ochranným faktorom.

▷ Z hygienických dôvodov by ste mali prístroj po každom použití dôkladne vyčistiť podľa popisu v kapitole „Čistenie“. Odstráňte tak masné usadeniny a iné zvyšky.

Možné vedľajšie účinky

Ak postupujete podľa tohto návodu a sledujete reakciu svojej pokožky, sú komplikácie alebo vedľajšie účinky veľmi nepravdepodobné. V konečnom dôsledku však každý človek inak reaguje na mechanický účinok čističa pórov, ktorý môže z pozitívneho hľadiska zlepšiť prerušenie pokožky, pri nadmernom namáhaní však môže spôsobiť alergické reakcie, sčervenanie pokožky, prasknutie žiliek alebo krvné výrony.

Ak by tieto nežiadúce reakcie neustúpili do dvoch dní alebo by sa vyskytli iné ťažkosti, požiadať o radu svojho lekára.


Čistenie

▷ Vyčistite prístroj z hygienických dôvodov ihneď po používaní, aby ste odstránili masné usadeniny a ostatné zvyšky. **Pri čistení hnisavých akné vyrážok vyčistite nastavce po každej jednej vyrážke**, aby ste predišli tvorbe ďalších vyrážok akné.

1. Vypnite prístroj.

2. Stiahnite nasávací nastavce, dôkladne ho umyte zriadeným mydlovým roztokom a následne ho dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou. Nechajte ho dobre vyschnúť, skôr ako ho znova použijete alebo odložíte.

3.

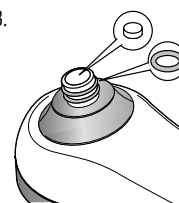

Odoberte penový filter z nasávacej dýzy a vypláchnite ho. Nechajte ho dobre osušiť, kým ho budete znova používať.

▷ Priblíli sme vám 50 náhradných filtrov. Vymeňte filter, ak je poškodený alebo znečistený.

▷ V normálnom prípade nie je potrebné vymeniť tesniaci krúžok. Na dôkladné čistenie ho môžete jednoducho odobrať. Ak je tesniaci krúžok poškodený, vymeňte ho jedným z náhradných tesniacich krúžkov.

4. Samotný prístroj a predovšetkým platničku okolo nasávacej dýzy utrite vlhkou handričkou dôkladne dočista. Vnútro dýzy môžete vyčistiť mierne navlhčenou vatovou tyčinkou.