


Elastický akumulátorový ohrevný chrbtový pás

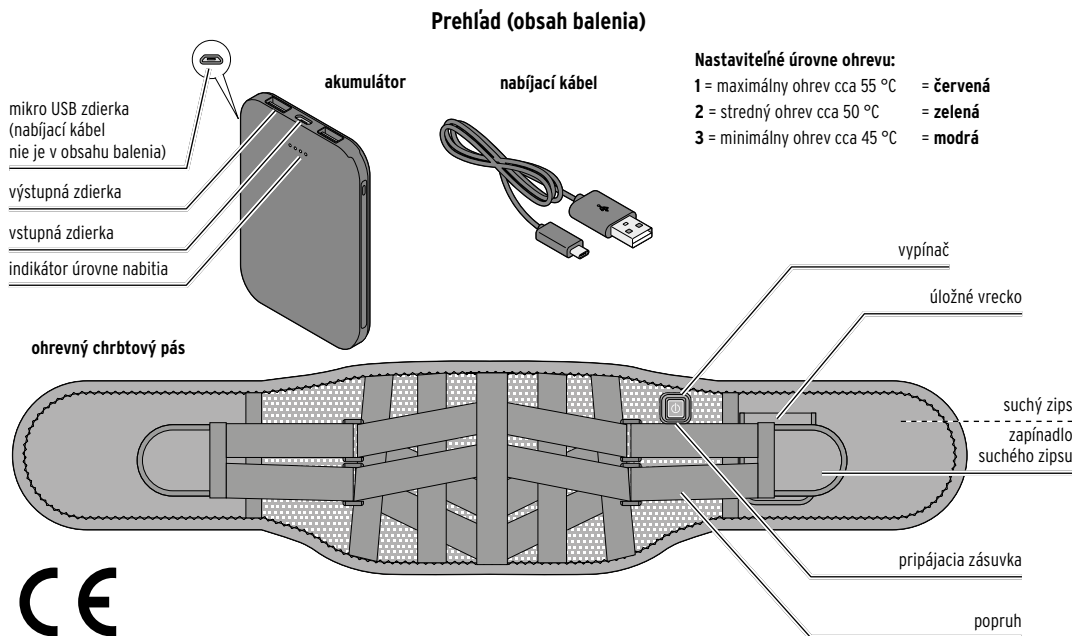

Vážení zákazníci!

Váš nový ohrevný chrbtový pás príjemne zohreje váš chrbát a kríže, a pomôže vám uľaviť od bolesti alebo si jednoducho prehriať a uvoľniť oblasť chrbta a krížov. Nepoužívajte ho však priamo na holej pokožke.

Vďaka akumulátoru vás nebude nič obmedzovať v pohybe. Ohrevný chrbtový pás môžete pokojne nosiť aj pod oblečením.

Váš tím Tchibo

Výrobok je flexibilný ohrevný prístroj s nízkou spotrebou energie. Zohreje sa za približne 15 - 20 minút. Ak chcete vyskúšať, aký je teplý, nezabúdajte, že teplotu, ktorá sa vám pri dotyku rukou zdá byť vlažná, môžete na povrchu tela pociťovať ako horúcu.

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Výstražné slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO varuje pred bezprostredne hroziacim vážnym zranením alebo ohrozením života.

VAROVANIE varuje pred možným vážnym zranením alebo ohrozením života.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplnujúce informácie.

Symboly na ohrevnom chrbtovom páse, ktoré sa musia dodržiavať



Prečítajte si pokyny a návod na obsluhu



Nevpichujte ihly ani podobné predmety



Nepoužívajte zložené ani zrolované




Nevhodné pre deti do 3 rokov



Neprať



Nebeliť

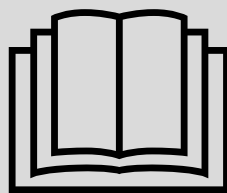

Prečítajte si pokyny! Dôležité upozornenia - uschovajte si ich na neskoršie použitie!



Nežehliť



Nečistiť chemicky



Nesušiť v sušičke

Pre vašu bezpečnosť

Účel použitia

Ohrevný chrbtový pás je určený na použitie v súkromných domácnostiach podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Výrobok nie je vhodný na použitie v nemocniciach, lekárske ambulanciách a pod.

Ohrevný chrbtový pás môžu používať deti, ak sa budú dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v časti „Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje“. Upozorňujeme však, že veľkosť pásu nie je prispôbená detskému telu, preto odporúčame, aby ho používali osoby staršie ako 18 rokov.

Ohrevný chrbtový pás nie je zdravotnícka pomôcka.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti vo veku od 0 do 3 rokov, pretože nedokážu reagovať na prehriatie.
- Tento prístroj smú používať deti vo veku od 3 do 8 rokov, ak sú počas používania pod neustálym dozorom rodiča alebo inej dospelšej osoby a prístroj je neustále nastavený na najnižšiu úroveň ohrevu s minimálnou teplotou.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ pritom nie sú pod dozorom.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo ohrozenia života pre osoby s kardiostimulátorom

- Elektromagnetické polia vyžarované týmto elektrickým výrobkom môžu za určitých okolností narušiť funkciu vášho kardiostimulátora. Pohybujú sa však hlboko pod limítnymi hodnotami. Pred použitím tohto výrobku sa preto poraďte so svojím lekárom a s výrobcom kardiostimulátora.

Nepoužívajte ohrevný chrbtový pás v prípade...

...osôb, ktoré nedokážu správne vnímať teplo. Malé deti sú citlivejšie na teplo. Užívanie liekov alebo určité ochorenia, ako je napríklad cukrovka, môžu spôsobiť poruchy vnímania teploty a tepla. Ľudia so zdravotným postihnutím alebo ľudia s podlomným zdravím nemusia dať najavo, že im je príliš teplo.

...detí do 3 rokov, bezvládných a chorých osôb alebo osôb so zníženou citlivosťou na teplo.

...domácich alebo iných druhov zvierat.

Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo ak máte problémy s krvným obehom, poraďte sa najskôr so svojím lekárom.

Ak sa počas používania výrobku nebudete cítiť dobre alebo budete pociťovať akékoľvek iné ťažkosti, prestaňte ho používať. V prípade potreby sa poraďte s lekárom.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vlhkosti

- Neponárajte výrobok, batériu ani nabíjací kábel do vody ani iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok nenabíjajte v exteriéri ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Akumulátor nenabíjajte v kúpeľni, v blízkosti umývadiel ani iných nádob naplnených tekutinami (napr. vázy).

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Na nabíjanie pripojte výrobok iba do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa technické špecifikácie prístroja.
- Na nabíjanie používajte iba vhodné sieťové adaptéry (pozrite si „Technické údaje“).
- Nepoužívajte chybné sieťové adaptéry a nepokúšajte sa ich opravovať.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa z nej dal sieťový adaptér v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel položte tak, aby sa oň nikto nepotkol.
- Sieťový adaptér vytiahnite z elektrickej zásuvky v prípade porúch počas nabíjania, po nabití a pri búrke. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za nabíjací kábel.
- Do ohrevného chrbtového pásu nestrkajte špicaté predmety, ako napr. zatváracie špendlíky a pod.
- Výrobok aj nabíjací kábel uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov a ostrých hrán.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky, ak sú niektoré jeho súčasti viditeľne poškodené alebo ak vám spadol akumulátor.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku nechajte vždy vykonať iba v špecializovaných servisoch. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu

- V blízkosti výrobku nepoužívajte žiadne spreje. V najhoršom prípade sa sprej môže vzniesť.
- Aby ste predišli lokálnemu prehriatiu a poškodeniu výrobku, používajte výrobok iba v rozvinutom stave. Pri používaní nesmie byť dvakrát preložený ani pokrčený a nesmie byť ani silno zohnutý.
- Výrobok je vybavený tepelným spínačom. Ten slúži ako ochrana proti prehriatiu. Ak sa spínač vypne, pred opätovným zapnutím nechajte výrobok vychladnúť na izbovú teplotu.
- Dávajte pozor, aby ste počas používania nezaspali. Ak ste počas používania veľmi unavení alebo plánujete výrobok používať dlhší čas, pre istotu radšej nastavte najnižšiu úroveň ohrevu.
- V ohrevnom chrbtovom páse používajte iba dodaný akumulátor. Akumulátor zároveň používajte iba v ohrevnom chrbtovom páse.
- Počas nabíjania sa akumulátor zahreje. Počas nabíjania akumulátor nikdy nezakrývajte.

Nebezpečenstvo popálenín

- Dlhodobé používanie na najvyššej úrovni ohrevu môže spôsobiť podráždenie pokožky a popáleniny. Ak plánujete výrobok používať dlhší čas, pre istotu radšej nastavte najnižšiu úroveň ohrevu.
- Aby ste predišli popáleninám na pokožke, pred použitím otestujte teplotu chrbtovo ruky (nie dlaňou, pretože tá je menej citlivá ako iné časti tela).
- Výrobok nepoužívajte priamo na holej pokožke. Používajte ho vždy aspoň cez jednu vrstvu oblečenia.

Vecné škody

- Výrobok podlieha starnutiu. Preto pred každým použitím skontrolujte, či na ňom nevidno známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sú viditeľné takéto príznaky, pred opätovným použitím nechajte výrobok skontrolovať v odbornom servise.
- Ostré alebo špicaté predmety (napr. šperky, pracky na opasok a pod.) uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od výrobku.
- Výrobok vždy skladujte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu iných zdrojov tepla. Nepokladajte naň žiadne ťažké predmety.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenia k akumulátoru:


- Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Nesmie sa rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Akumulátor nevybíjajte nasilu.
- Akumulátor uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepokúšajte sa akumulátor rozoberať ani znova skladať.
- Akumulátor zlikvidujte podľa pokynov v kapitole „Likvidácia“.

Používanie

Nabíjanie akumulátora

Ak je to možné, akumulátor pred každým použitím úplne nabite.

1. Akumulátor vyberte von z úložného vrečka na ohrevnom chrbtovom páse.

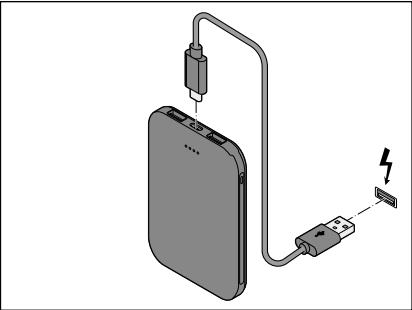

2. Malý konektor priloženého nabíjacieho kábla zapojte do vstupnej zdievky na akumulátore.
3. Veľký konektor nabíjacieho kábla pripojte k vhodnému sieťovému adaptéru USB (nie je súčasťou balenia, pozri „Technické údaje“).
4. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

Indikátor úrovne nabitia zobrazí úroveň nabitia akumulátora:

- ○ ○ ○ 25 %
- ● ○ ○ 50 %
- ● ● ○ 75 %
- ● ● ● 100 %

LED nesvieti = úplne vybitý
LED blinká = nabíja sa
LED svieti neprerušovane = je nabitý
Keď je akumulátor úplne nabitý, rozsvietia sa všetky 4 LED indikátory.

Doba nabíjania: max. 4 hodiny (pri 2 A)
Dĺžka používania (s úplne nabitým akumulátorom): cca 2 hodiny na najvyššej úrovni ohrevu

i LED diódy zhasnú po cca 30 sekundách po odpojení nabíjacieho kábla od akumulátora.


5. Keď je akumulátor úplne nabitý, odpojte sieťový adaptér USB z elektrickej zásuvky a nabíjací kábel od akumulátora.

6. Akumulátor vložte späť do úložného vrečka na ohrevnom chrbtovom páse.


i Ak sa výrobok veľmi dlho nepoužíval, akumulátor sa mohol natoľko vybiť, že ho už nie je možné viac použiť. V tomto prípade musíte akumulátor najskôr nabíť podľa opisu v časti „Nabíjanie akumulátora“.

Nasadenie a zapnutie ohrevného chrbtového pásu


1. Pred použitím si dôkladne prečítajte kapitolu „Bezpečnostné pokyny“ uvedenú vpredu v tomto návode. Nájdete v nej množstvo informácií, ktoré je nutné zohľadniť, aby bolo používanie bezpečné.

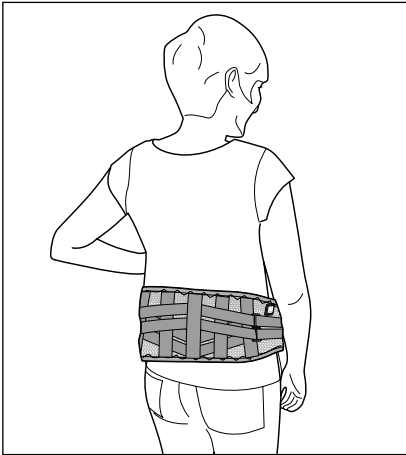

2. Nasaďte si ohrevný chrbtový pás na spodnú časť chrbta. Vypínač a úložné vrečko na akumulátor smerujú nahor. Zapnite si ohrevný chrbtový pás pomocou suchého zipsu tak, aby ohrevný chrbtový pás držal na požadovanom mieste, ale zároveň bol pri nosení pohodlný a nikde vás netlačil.

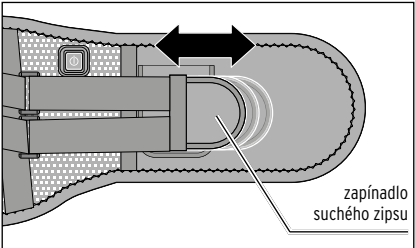

▷ Dĺžku popruhu si môžete prispôsobiť uvoľnením zapínadiel suchého zipsu na popruhoch a ich opätovným upevnením v zelanej polohe.

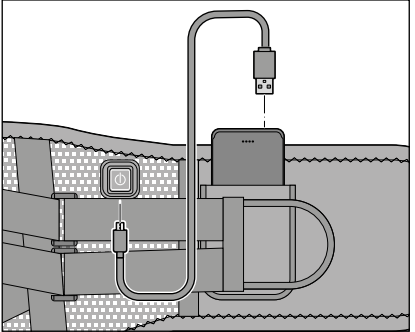

3. Nabíjací kábel ohrevného chrbtového pásu zapojte do výstupnej zdievky na akumulátore a pripájacej zásuvky na ohrevnom chrbtovom páse podľa znázornenia na obrázku.

Kontrolka na vypínači svieti striedavo červenou, zelenou a modrou farbou.

4. Akumulátor vložte do úložného vrečka.
5. **i** Stlačením vypínača zapnete prístroj.

Kontrolka vo vypínači sa rozsvieti na červeno.

6. Stlačením vypínača môžete prepínať medzi úrovňami ohrevu.

Kontrolka vo vypínači svieti...
... na červeno = najvyššia úroveň ohrevu (cca **55 °C**).
... na zeleno = stredná úroveň ohrevu (cca **50 °C**).
... na modro = najnižšia úroveň ohrevu (cca **45 °C**).
Najprv vyberte červenú úroveň ohrevu.

Po cca 15 -20 minútach dosiahne ohrevný chrbtový pás maximálnu teplotu. Teraz môžete prepnúť späť na nižšiu úroveň ohrevu.

7. Opätovným stlačením vypínača prístroj vypnete.

i Ohrevný chrbtový pás má ochranu proti prehriatiu a automaticky sa vypne po cca 60 minútach.

Pred opätovným zapnutím nechajte akumulátor a ohrevný chrbtový pás vychladnúť na izbovú teplotu.

Čistenie a uschovanie



VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

Pred práním pásu bezpodmienečne vyberte z ohrevného chrbtového pásu akumulátor. V opačnom prípade by sa akumulátor mohol poškodiť. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.



NEBEZPEČENSTVO - Elektrický prúd



Neponárajte výrobok, akumulátor ani nabíjací kábel do vody ani iných tekutín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

1. Keď chcete ohrevný chrbtový pás po použití vyčistiť, vždy ho najskôr nechajte úplne vychladnúť.
2. Utrite ho ľahko navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
3. Skôr ako ho znovu použijete alebo odložíte, nechajte ho úplne vyschnúť.

Uschovávanie

- ▷ Pred poskladaním nechajte ohrevný chrbtový pás vychladnúť/vyschnúť.
- ▷ Na ohrevný chrbtový pás nekladte žiadne ťažké predmety. Nesmú sa na ňom vytvoriť žiadne záhyby.
- ▷ Ohrevný chrbtový pás vždy skladujte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu iných zdrojov tepla.

Technické údaje

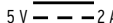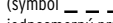Model:	727 230
Akumulátor:	Lítiovo-iónový akumulátor 3,7 V/5000 mAh menovitá energia: 18,5 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nie je možné vymeniť)
Vstup:	5 V  2 A
Výstup:	5 V  2 A (symbol  označuje jednosmerný prúd)
Výkon:	10 W
Trieda ochrany:	III 
Doba nabíjania:	max. 4 hodiny
Doba používania (s úplne nabitým akumulátorom):	cca 2 hodiny na najvyššej úrovni ohrevu
Spotreba el. prúdu vo vypnutom stave:	≤ 0,3 W
Sieťový adaptér (nie je priložený):	Vstup: AC 100 - 240 V 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 2,0 A
Vrchný materiál:	70 % polyester, 30 % elastodien
Spodný materiál:	95 % polyester, 5% elastan
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Porucha/náprava

Nefunguje

Je vybitý akumulátor?

- Nabite akumulátor podľa postupu uvedeného v kapitole „Používanie“, časť „Nabíjanie akumulátora“.
- Skontrolujte, či sú konektory nabíjacieho kábla pevne zasunuté do výstupnej zdievky na akumulátore a do pripájacej zásuvky na ohrevnom chrbtovom páse.
- Tepelný spínač mohol príp. vypnúť ohrevný chrbtový pás. Pred opätovným pripojením akumulátora a zapnutím výrobu najskôr vyberte akumulátor z ohrevného chrbtového pásu a nechajte výrobok vychladnúť na izbovú teplotu. Ak výrobok ani po tomto postupe nefunguje, požiadajte o pomoc odborný servis.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Na lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.

Číslo výrobku: 727 230

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk