




Epilátor na tvár

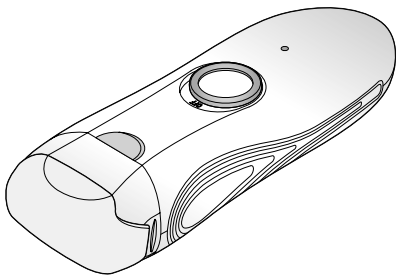

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 122494HB43XXII · 2021-11

Vážení zákazníci!

Váš nový epilátor na tvár vám umožní veľmi dôkladné odstránenie nepríjemných chlpkov z rôznych častí tela. Je výnimočne vhodný na ošetrovanie citlivých partií pokožky. Vďaka svojmu šikovnému tvaru a nízkej hmotnosti je tento prístroj ideálnym spoločníkom aj na cesty. Prajeme vám veľa radosti z tohto výrobku.

Váš tím Tchibo

Obsah

3	Bezpečnostné upozornenia	13	Čistenie a uschovanie
8	Prehľad (obsah balenia)	14	Poruchy/pomoc
9	Nabíjanie akumulátora	15	Technické údaje
10	Používanie	16	Likvidácia



www.tchibo.sk/navody

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Epilátor na tvár je určený len na epiláciu ľudských chĺpkov tela. Nesmie sa aplikovať na zvieratá. Nie je vhodný na epiláciu väčších plôch pokožky.

Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa smie nabíjať len v suchých interiéroch.
Na nabíjanie používajte vhodný USB sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky), ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja, a iba priložený USB nabíjací kábel.
- Nepoužívajte a nenabíjajte prístroj v blízkosti vody.
Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete. Neponárajte výrobok počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
-  Varovanie - Prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla a iných nádob naplnených vodou. V takýchto priestoroch ho ani nepripájajte do elektrickej siete na nabíjanie.
- Ak prístroj spadne počas nabíjania do vody, nesiahajte naň! Ihneď vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Pred opätovným zapojením prístroja do elektrickej siete nechajte prístroj, USB nabíjací kábel a sieťový adaptér dôkladne vyschnúť.

- Prístroj nenabíjajte v exteriéroch alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Prístroj nepoužívajte v prípade, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe.
- Prístroj zapájajte na nabíjanie iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi sieťového adaptéra.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, po úplnom nabití prístroja, pri búrke a pred čistením prístroja. Ťahajte vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za USB nabíjací kábel.
- Používajte len priložený nabíjací USB kábel, ako aj sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. USB nabíjací kábel uložte tak, aby ste zaň náhodou nestiahli prístroj.

- USB nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo po jeho páde.
- Poškodený USB nabíjací kábel alebo sieťový adaptér už nepoužívajte na nabíjanie prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Nikdy neotvárajte teleso prístroja. Na eliminovanie nebezpečenstiev zverte opravy prístroja, nabíjacieho kábla alebo sieťového adaptéra výlučne špecializovanej opravovni.


VAROVANIE pred poraneniami

- Nepoužívajte prístroj na, resp. v oblasti otvorených rán, rezných rán, pokožky spálenej slnkom alebo plúzgierov.
- Zabráňte kontaktu prístroja s vlasmi a mihalnicami.
- Ak je vaša pokožka veľmi citlivá, alebo ak trpíte na kŕčové žily, hemofíliu alebo kožné ochorenie, požiadajte pred použitím o radu svojho lekára.

POZOR - Vecné škody


- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. Dbajte na to, aby pri čistení do prístroja neprenikla vlhkosť.

Prehľad (obsah balenia)

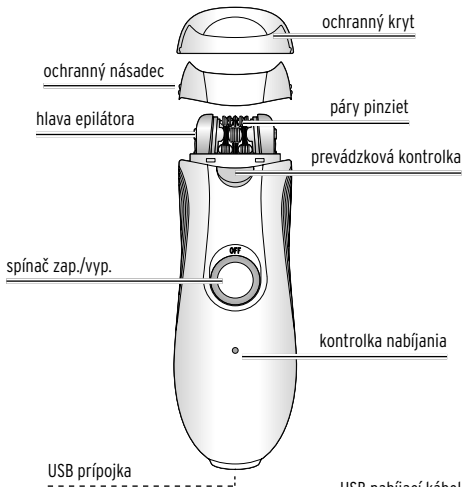

ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):

- úschovná taštička
- čistiaci štetec

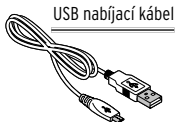


Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.
Počas nabíjania sa prístroj nedá zapnúť.



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Prístroj nenabíjajte priamo vedľa alebo nad umývadlom naplneným vodou.

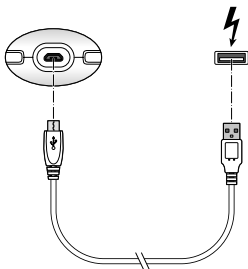

1. Prepojte nabíjací USB kábel s prístrojom a vhodným USB sieťovým adaptérom (nie je v obsahu balenia).
2. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky.

Nabíjanie sa spustí automaticky.

Počas nabíjania kontrolka nabíjania bliká, keď je akumulátor úplne nabitý, svieti nepretržite.
Teraz akumulátor úplne nabíte po dobu približne 4 hodiny.

3. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a USB nabíjací kábel z prístroja. Kontrolka zhasne.

Teraz je epilátor na tvár pripravený na použitie.

S plne nabitým akumulátorom môžete prístroj používať cca 30 minút. Potom sa musí akumulátor znovu cca 4 hodiny nabíjať.



- Na zachovanie plnej kapacity akumulátora prístroj nabite, aj keď ho nepoužívate, každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplote +10 °C až +40 °C.

Používanie

- ▷ Vyčistite si časť tela, ktorú chcete epilovať, teplou vodou a mydlom.
- ▷ Dôkladne osušte pokožku. Neaplikujte žiadne telové mlieko ani iné substancie.
- ▷ Na narovnanie chĺpkov jemne pretrite pleť drsnou hubkou a pod. proti smeru rastu chĺpkov.



- Ak používate epilátor prvýkrát, musí si naň vaša pokožka najskôr zvyknúť. Môže dochádzať k miernemu podráždeniu pokožky alebo k jej sčervenaniu. Ak by podráždenie pretrvávalo dlhšie ako 2 dni, obráťte sa na vášho lekára.
- Odporúčame vyskúšanie prístroja najskôr na necitlivom mieste, napr. na nohách.



1. Na zapnutie prepnete spínač zap./vyp. nahor.


Po zapnutí prístroja sa súčasne rozsvieti aj prevádzková kontrolka.




2. Napnite pokožku.

Príp. vystrite pažu alebo nohu a druhou rukou udržiavajte pokožku napnutú.



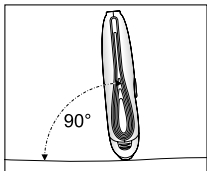

3. Priložte prístroj na pokožku pod uhlom 90° tak, aby bol spínač zap./vyp. otočený smerom k vám.

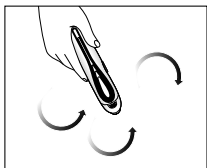

4. Pohybujte prístrojom krúživými pohybmi pri jemnom trení po povrchu pokožky. Príliš intenzívne pritláčanie prístroja na pokožku nie je potrebné.




5. Na vypnutie prepnite spínač zap./vyp. nadol.

Čistenie a uschovanie

POZOR - Vecné škody

- Epilátor sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou. Prístroj čistite iba štetcom na čistenie, v žiadnom prípade ho nečistite pod vodou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Vyčistite hlavu epilátora po každom použití:

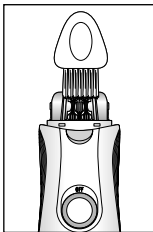

Stiahnite ochranný násadec a vykefujte všetky chĺpky, ktoré sa zachytia medzi kotúčmi a plastovými dielmi. Pritom opatrne otáčajte hlavu epilátora na sprístupnenie všetkých miest a na otvorenie kotúčov.

- ▷ V prípade potreby utrite prístroj mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja neprenikla vlhkosť.

- ▷ Príp. nabite akumulátor pred odložením prístroja. Nabudúce ho budete môcť okamžite použiť.
- ▷ Prístroj u nasadeným ochranným krytom uschovajte v dodanej úschovnej taštičke na suchom mieste mimo dosahu detí.

Poruchy / pomoc

Prístroj
nefunguje.

- Je akumulátor nabitý?
 - ▷ Nabite akumulátor (pozri kapitolu „Nabíjanie akumulátora“).

Výsledok
epilovania nie
je uspokojivý.

- ▷ Na narovnanie chĺpkov jemne pretrite pleť drsnou hubkou a pod. proti smeru rastu chĺpkov.
- ▷ Napnite pokožku. Pohybujte prístrojom krúživými pohybmi pri jemnom tlaku po povrchu pokožky.

Technické údaje

Model:	634 058
Vstup:	5 V  1 A (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Akumulátor:	NiMH, DC 2,4 V  300 mAh
Doba nabíjania:	4 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 30 minút (s plne nabitým akumulátorom)
Trieda ochrany:	III 
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku.

Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku: 634 058
