


Prístroj na masáž nôh

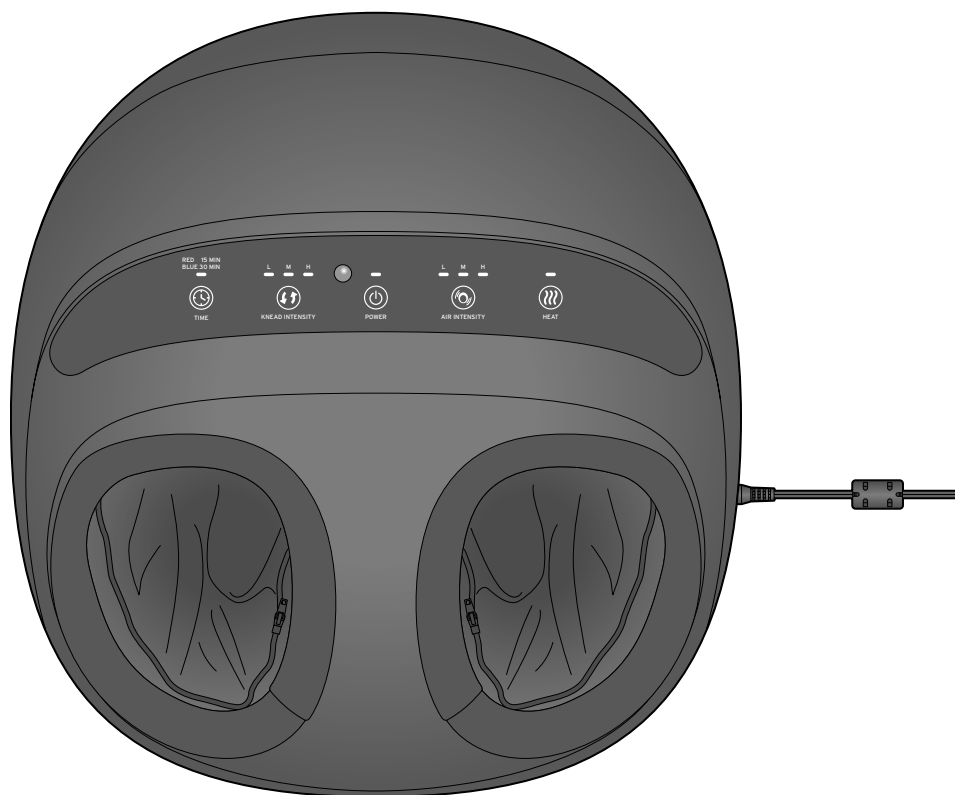

Vážení zákazníci,

vo vašom novom prístroji na masáž nôh sa nachádzajú rotujúce masážne hlavice a komory stlačeného vzduchu, ktoré napodobňujú tlakové a masírovacie pohyby masáže reflexných zón na nohách (chodidlách).

Prístroj na masáž nôh môže pomôcť ...

- ... povzbudiť prekrvenie nôh,
- ... podporiť regeneráciu buniek,
- ... revitalizovať a oživiť nohy,
- ... uvoľniť napnutia.

V tomto návode sme popísali bezpečné a správne používanie masážneho prístroja. Nezabúdajte, že nesprávne vykonaná alebo príliš dlho trvajúca masáž môže namiesto uvoľnenia privodiť napätie.

Obsah

3	K tomuto návodu	9	Výmena batérie
3	Bezpečnostné upozornenia	10	Čistenie a uschovanie
6	Prehľad (obsah balenia)	11	Poruchy/pomoc
8	Uvedenie do prevádzky	11	Technické údaje
8	Používanie	12	Likvidácia
8	Zapnutie a vypnutie		
8	Nastavenie časovača		
9	Nastavenie rýchlosti masáže nôh		
9	Nastavenie sily kompresie vzduchu		
9	Zapnutie a vypnutie vyhrievacej funkcie		
9	Používanie diaľkového ovládača		

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo smrti.

POKYN varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Prístroj na masáž nôh je určený na uvoľňujúcu masáž nôh. Dokáže podporiť prekrvenie nôh a uvoľniť napnutia.

Výrobok je koncipovaný na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné, terapeutické alebo medicínske účely.



Výrobok je určený na použitie v suchých interiéroch.

Výrobok nepoužívajte v kúpeľni alebo v saune, aby ste predišli ohrozeniam.

Výrobok sa nesmie aplikovať na zvieratá.

Prístroj nepoužívajte...

... pri ochoreniach alebo zraneniach na chodidlách (napr. ako sú otvorené rany, bradavice, plesne na nohách, vyrážka, opuchnuté alebo zapálené chodidlá),

... pri ochoreniach nôh alebo chodidiel (napr. zápal žíl na nohách, kŕčové žily),

... pri vysokom krvnom tlaku alebo abnormálnom tlaku, osteoporóze, cukrovke alebo trombózach,

... keď trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii nôh,

... keď používate kardiostimulátor a pod.,

... keď trpíte ochorením srdca alebo zhubným tumorom,

... ak máte poruchy krvného obehu alebo neurologické obmedzenia,

... keď sa necítite dobre alebo

... pri bolestiach z nevyjasnených dôvodov,

... u osôb, ktoré nedokážu správne vnímať teplo.

Malé deti reagujú na teplo citlivejšie.

Užívanie liekov alebo určité ochorenia, napr. diabetes, môžu spôsobiť poruchy vnímania teploty.

Postihnuté alebo choré osoby prípadne nevedia dať najavo, ak je im príliš teplo.

... u detí do 3 rokov a osôb odkázaných na pomoc, chorých, príp. u osôb s poruchou vnímania tepla.

Ak máte pochybnosti, konzultujte ich s lekárom, skôr ako začnete prístroj používať!

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajte mimo dosahu detí.
Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí.
- Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s...
 - ... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo ...
 - ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí iba...
 - ... pod dozorom alebo
 - ... po poučení o bezpečnom používaní prístroja a ...
 - ... po pochopení nebezpečenstiev, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie a údržba výrobku nesmie byť zverená deťom bez dozoru. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok, ako aj sieťový adaptér a prípojný kábel neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Nedotýkajte sa prístroja vlhkými rukami.
- Sieťový adaptér zapojte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá údajom podľa kapitoly „Technické údaje“.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... po použití,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného prístroja, sieťového adaptéra alebo prípojného kábla, resp. po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Keď je poškodený prípojný kábel, nesmiete ho sami opravovať ani meniť. Opravy prístroja alebo prípojného kábla zverte len špecializovanej opravovni, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstiev.
- Výrobok sa smie prevádzkovať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety.
- Skontrolujte pred každým použitím, či nevykazujú obe vnútorné podšívky v podperách nôh znaky opotrebenia alebo poškodenia. Ak sú viditeľné takéto znaky, nesmiete ďalej používať prístroj na masáž nôh.

Varovanie pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).
Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Neprikrývajte zapnutý prístroj počas prevádzky (napr. dekou alebo uterákom).
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.



Varovanie pred nebezpečenstvom poranenia

- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.


Vecné škody

- Prístroj používajte len v sede. Nevstávajte, keď ste strčili nohy do prístroja.
- Prístroj je navrhnutý na max. dobu prevádzky 30 minút. Prístroj nechajte vychladnúť najmenej 30 minút na teplotu prostredia, skôr ako ho znovu použijete.
- Chráňte batérie/akumulátory pred nadmerným teplom.
Vyberte batériu z diaľkového ovládača po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou. Na vylúčenie vzniku neželaných stôp na podlahách položte preto pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.


Prehľad (obsah balenia)

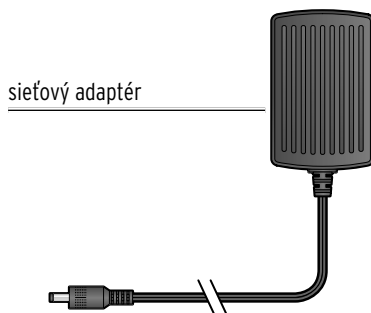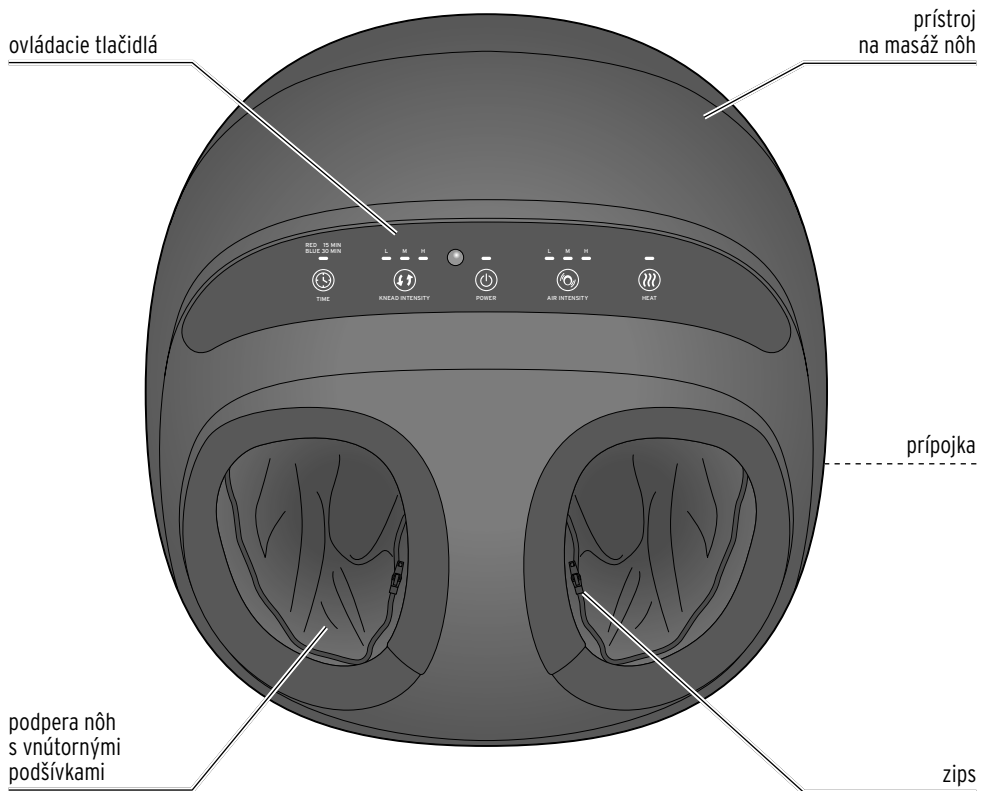

Dialkový ovládač

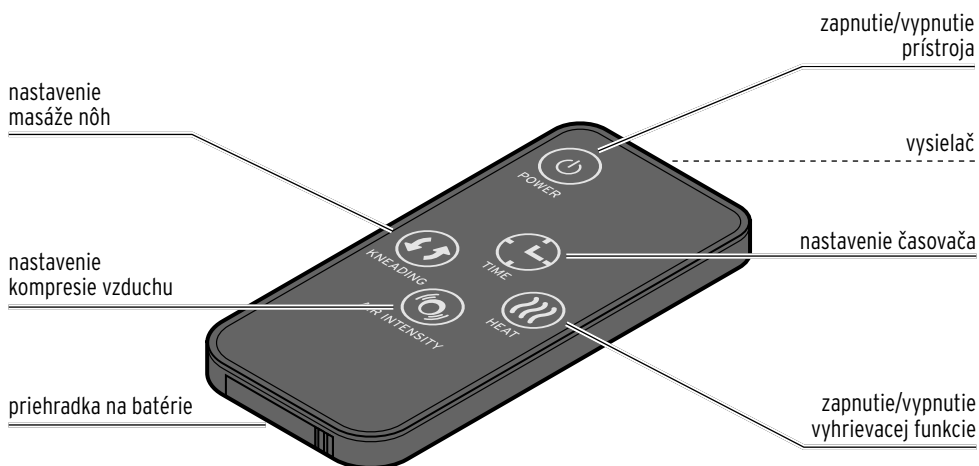

Ovládacie tlačidlá

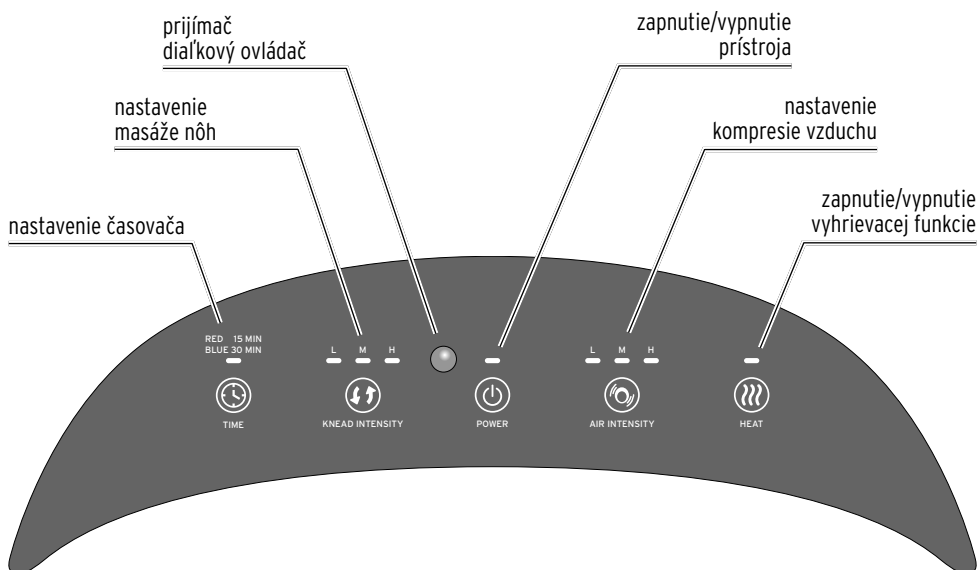

Uvedenie do prevádzky




NEBEZPEČENSTVO pre deti -


Nebezpečenstvo ohrozenia života
udusením/prehltnutím

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okamžite ho zlikvidujte.

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Stiahnite ochrannú fóliu z ovládacích tlačidiel.

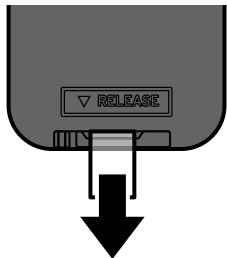

3. Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik.

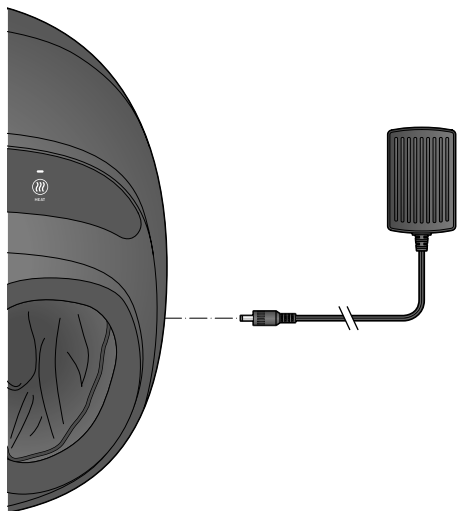

4. Zapojte prípojný konektor sieťového adaptéra do prípojnej zásuvky na masážnom prístroji.
5. Zapojte sieťový adaptér do dobre prístupnej zásuvky.
6. Zaznie signálny tón a rozblíka sa kontrolka **Power**.

Používanie

POKYN - Vecné škody

Prístroj je navrhnutý na max. dobu prevádzky 30 minút. Prístroj nechajte vychladnúť najmenej 30 minút na teplotu prostredia, skôr ako ho znovu použijete.

1. Posad'te sa pohodlne na stoličku.
2. Úplne zasun'te nohy do podpier nôh na prístroji.
3. Zaujmite uvoľnenú polohu.

Zapnutie a vypnutie

▷ Stlačte tlačidlo , aby ste prístroj zapli.

Zaznie signálny tón a natrvalo sa rozsvieti kontrolka **Power**.

Je nastavená doba masáže 15 minút a je zobrazená na displeji. Intenzity funkcie masáže nôh  a kompresie vzduchu  sú nastavené na nízke (**L**) a je zapnutá vyhrievacia funkcia .

Rozsvietia sa príslušné kontrolky.

▷ Opäť stlačte tlačidlo , aby ste prístroj vypli.

Zaznie signálny tón, prístroj sa vypne a všetky kontrolky zhasnú.

Nastavenie časovača

Pri zapnutí je prednastavená doba prevádzky 15 minút a príslušná kontrolka svieti na červeno.

▷ Na nastavenie doby prevádzky na 30 minút stlačte .

Kontrolka svieti na modro.

▷ Na opätovné nastavenie doby prevádzky na 15 minút opäť stlačte .

Keď ste prístroj vopred nevypli tlačidlom , automaticky sa vypne po uplynutí doby prevádzky.

Nastavenie rýchlosti masáže nôh

Pri zapnutí je rýchlosť funkcie masáže nôh nastavená na nízku (L).

▷ Na zmenu rýchlosti masáže nôh stlačte .

Rýchlosť sa zmení na strednú (M) > vysoká (H) > vyp > (L) atď.

Nastavenie sily kompresie vzduchu

Pri zapnutí je sila kompresie vzduchu nastavená na nízku (L).

▷ Na zmenu sily kompresie vzduchu stlačte .

Sila kompresie vzduchu sa zmení na strednú (M) > vysoká (H) > vyp > (L) atď.

Zapnutie a vypnutie vyhrievacej funkcie

Pri zapnutí je vyhrievanie zapnuté a nepretržite svieti kontrolka .

▷ Na vypnutie vyhrievacej funkcie stlačte tlačidlo .

Kontrolka  zhasne.

▷ Na zapnutie vyhrievacej funkcie opäť stlačte tlačidlo .

Používanie diaľkového ovládača

Všetky funkcie môžete ovládať aj diaľkovým ovládačom.

▷ Nasmerujte diaľkový ovládač vysielačom na prijímač a stlačte príslušné tlačidlo.

 zapnutie/vypnutie zariadenia

 nastavenie časovača


 nastavenie rýchlosti masáže nôh

 zapnutie a vypnutie vyhrievacej funkcie

 nastavenie sily kompresie vzduchu

Výmena batérie


Keď už prístroj nereaguje na diaľkový ovládač, musíte vymeniť batériu.

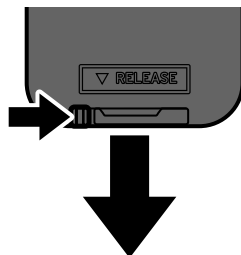


1. Zatlačte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

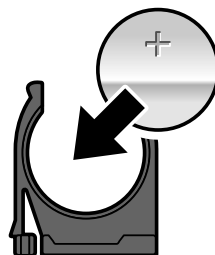

2. Nahradte vybitú batériu novou. Dbajte pri tom na správnu polaritu (symbolom + nahor).

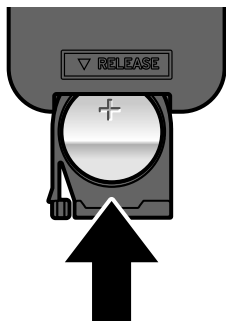

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Čistenie a uschovanie



NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom


- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Výrobok, ako aj sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Vnútorne podšívky musia byť úplne vysušené pred opätovným vložením do prístroja na masáž nôh a pripojením prístroja do elektrickej siete.
- V žiadnom prípade nezapínajte prístroj na masáž nôh na sušenie vnútorných podšívok vyhrievacou funkciou.

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nechajte prístroj niekoľko minút chladnúť.
2. Drobné fláky odstráňte handričkou alebo vlhkou hubou.

Vnútorne podšívky v podperách nôh môžete vybrať a vyprať. Na pranie vnútorných podšívok postupujte nasledovne:

3. Otvorte zipsy na podperách nôh.
4. Vytiahnite vnútorne podšívky z podpier nôh.

5. Ručne vyperte vnútorne podšívky vlažnou vodou a trochu jemného pracieho prostriedku.
6. Pred opätovným osadením vnútorných podšívok ich nechajte úplne vyschnúť na vzduchu. Nekládte ich na sušenie na vykurovací zdroj a nesusťte ich v sušičke.

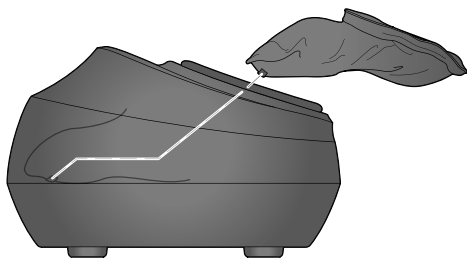

7. Opäť vložte vnútorne podšívky do podpier nôh.
 8. Vnútorná podšívka a podpery nôh sú vybavené páskami na suchý zips. Uistite sa, že pásiky suchého zipsu ležia správne na sebe a zatvorzťte zipsy.
- ▷ Prístroj uschovajte na suchom, chladnom mieste.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť	• Zapojili ste sieťový adaptér do zásuvky? • Je prípojný konektor pevne zapojený v prípojnej zásuvke?
Masážne hlavice rotujú veľmi pomaly.	• Netlačíte nohami príliš silno na masážne hlavice? Nohy smú byť iba položené.
Prístroj sa počas prevádzky vypne.	• Prístroj sa prehrial. Vypnite prístroj. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a pred opätovným zapnutím nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu. • Nebol prístroj zapnutý dlhšie ako 30 minút bez prerušenia? Prístroj sa vypne z bezpečnostných dôvodov po 30 minútach. Nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu.

Technické údaje

Model:	MD-50230B
Číslo výroby:	647 030
Batérie:	1x CR2025/3 V (Li) menovitá energia: 0,45 Wh (testované podľa UN 38.3)
Sieťový adaptér:	
Model:	IVP1200-2500G
Výrobca:	(Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd., 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen, 361000, P.R. China)
Trieda ochrany:	II 
Vstup:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	12,0 V 2,5 A 30,0 W
	(symbol  znamená jednosmerný prúd)
	(symbol  ukazuje pôľovanie zástrčky)
Účinnosť	v prevádzke Ø: > 86,95 %
	pri nízkom zaťažení (10 %): > 85 %
Príkon pri nulovom zaťažení:	< 0,1 W
Trieda ochrany:	III 
Krátkodobá prevádzka:	30 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Nemecko)



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým

odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa. Prázdne batérie a akumu-

látory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Model:

MD-50230B

Výrobca:

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Nemecko)